

## Instruksjon for bruk av Urine-Monovette

Urine-Monovette brukes til urinpeptidtest. Den inneholder et konserveringsmiddel - hvitt pulver. Urine-Monovette skal fylles med 10 ml urin.

For in-vitro-diagnostisk bruk



Monter plastikkanylen på monovetten.  
Stikk kanylen ned i urinbeholderen (hvitt lokk).  
Sug opp urin ved å dra opp Monovette-stempelet til linjen.

Monter plastikkanylen på monovetten.  
Stik kanylen ned i urinbeholderen (hvitt låg).  
Træk op urin ved at drage op Monovette-stempelet til linjen.

Monter plastikkanylen på monovetten.  
Stick kanylen ner i urinbeholdaren (hvitt lock).  
Sug upp urin vid att dra upp Monovette-stämpeln till linjen.

## Instruktion for brug af Urine-Monovette

Urine-Monovette bruges til urinpeptidtest. Den indeholder et konserveringsmiddel - hvidt pulver. Urine-Monovetten skal fyldes med 10 ml urin.


For in-vitro-diagnostisk brug



Hold Monovetten i vertikal posisjon, kanylen pekende oppover og dra stempelet ned til enden.

Hold Monovetten i vertikal position, kanylen pegende opad og drag stempelet ned til enden.

Håll Monovetten i vertikal position, kanylen pekande uppåt och dra stämpeln ner till ändan.

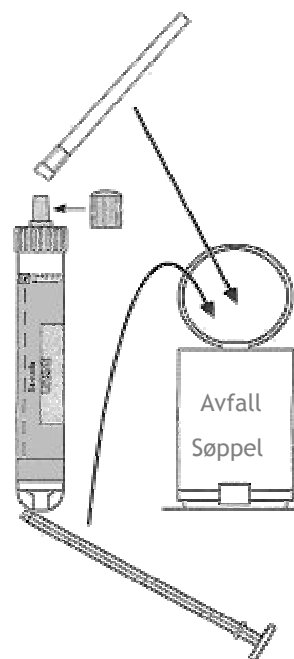

Fjern kanylen.  
Brek av stempelet.  
Monter hetten/kapselen på Monovette kjeglen/spissen.


Fjern kanylen.  
Bræk af stempelet.  
Monter hættten/kapselen på Monovette kæglen/spidsen.

Ta bort kanylen.  
Knäck av stämpeln.  
Monter hättan/kapseln på Monovette käglan/spetsen.

## Instruktion för användning av Urine-Monovette

Urine-Monovette används till urinpeptidtest. Den innehåller ett konserveringsmedel - vitt pulver. Urine-Monovetten ska fyllas med 10 ml urin.

För in-vitro-diagnostisk användning

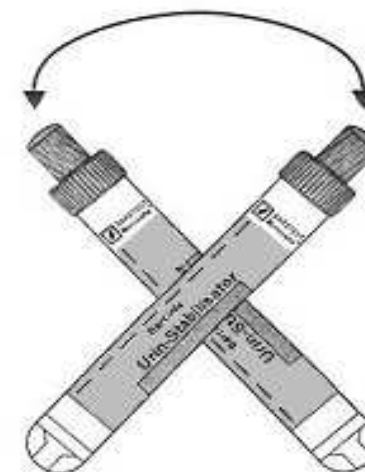

Bland godt til alt pulveret er løst (minst 6 ganger).

Urinbeholderen med grønt lokk kastes.

Bland godt til alt pulveret er opløst (mindst 6 gange).

Urinbeholderen med grønt låg kastes.

Blanda väl tills allt pulvret är upplöst (min. 6 gånger).

Urinbeholdaren med grønt lock kastas.





